



CAD/CAM RENDSZEREK | KÉZIDARABOK | HIGIÉNIAI RENDSZEREK | KEZELŐEGYSÉGEK | RÖNTGEN RENDSZEREK

infiniDent - a Sirona központi műhelye

**Ön megtervezi, mi formába öntjük.
www.infinident.gb.com**

The Dental Company

sirona.

infiniDent: minimális munka, maximális anyag választás

Rugalmas választási lehetőségek

Az infinidDent, a Sirona modern központi műhelye kerámia és nem-nemesfém koronákat, hídvázakat, valamint a Strauman® Fogászati Implant Rendszerhez való titánium és kerámia csontokat kínál. Akár különálló egységként alkalmazza az inEost, akár már együtt az inLab rendszerrel, az anyagok széles választékából származó előnyt akkor is élvezheti. Ez lehetővé teszi a fogászati ügyfelek igényeihez való rugalmas alkalmazkodást. Az infinidDent növeli a szolgáltatások választékát a laboratóriumban.

Egyszerű választani

Kovácsoljon előnyt a Sirona infinidDent CAD/CAM technológiájából, hogy több szolgáltatást nyújthasson: a számítógépén megtervezi a pótlást, majd elküldi az adatokat az infinidDent internetes portálján keresztül.

Egy választás - teljes anyag skála

Az infinidDent pótlások az Ön által küldött digitális adatokból készülnek. A gyárilag előállított kerámia tömböket a pontosság érdekében számítógép-vezérelt csiszológépek munkálják meg. Az anyagtól függően a kerámia pótlások szinterezésre, vagy üveg-infiltrálásra kerülnek. A fém pótlásokat rétegről rétegre lézerszinterezéssel szilárdítják meg, az implantátumokat pedig a Straumann® (Svájc, Basel) állítja elő.

Négy könnyed lépés a sikerhez:

1

Beolvasás

Az inEos, vagy az inLab integrált szkennerek segítségével beolvassa a modellt, megtervezi a kívánt pótlás típusát a monitoron a következő szoftverek egyikével: Framework 3D, WaxUp 3D, vagy Abutment 3D.



2

Adat továbbítás


Lépjen fel a www.infinidDent.gb.com oldalra. Regisztráljon mint új ügyfél, vagy lépjen be felhasználónevével és jelszavával, majd küldje el az adatokat. Mindez csupán néhány egér kattintás.



3

Előállítás

A beérkező adatok felülvizsgálatra kerülnek, majd a számítógép-vezérelt csiszoló- vagy lézerszinterező gépek segítségével megtörténik az előállítás. Végül következik a minőségellenőrzés és a kiszállítás - mindez 4 napon belül!

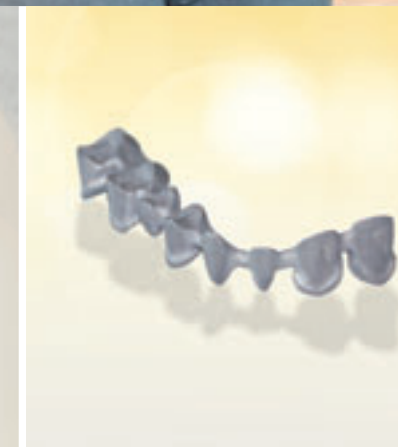

4

Befejezés

Mi maradt még hátra? Vegye elő kezűgyességét és szakértelmét a korona vagy hídváz porcelánnal való bevonásához. És ennyi!



Az infiniDent anyagokról röviden



infiniDent koronák és hídvezak



Cirkónium oxid sapkákhöz és akár 10 tagú hídvezakhoz



Alumínium oxid sapkákhöz és akár 3 tagú elülső fog hídvezakhoz



Szűrt kerámia sapkákhöz és maximum 40 mm-es anatómiai hídvezakhoz



Kobalt-króm ötvözet sapkákhöz és akár 8 tagú hídvezakhoz: Sirona inCorisNP



Cirkónium csapok a Straumann® Fogászati Implant Rendszerhez



Titánium csapok a Straumann® Fogászati Implant Rendszerhez

Az infiniDent az anyagok széles választékát kínálja. A pótlás típusától és ügyfele igényeitől függően nálunk mindig kéznél van a megfelelő anyag. Akár egy többtagú cirkónium-oxid hídvezakra van szüksége, akár az olcsó alternatív megoldásra kobalt-króm anyagból; titánium vagy kerámia implant csapok vagy esztétikus elülső fogpótlás - az infiniDent segítségével mindig minden lehetséges.

Az infiniDent által nyújtott előnyök:

■ Megnövekedett rugalmasság

Az infiniDent alkalmazkodik az Ön termelési rendjéhez és lehetővé teszi a termelés kihelyezését és maximalizálását.

■ Megnövekedett termelékenység

Az infiniDent lehetővé teszi, hogy Önnek csupán a felépítésre és a kerámiával való bevonatolásra, illetve a további megrendelésekre és az eladásra kelljen odafigyelnie.

■ Még nagyobb anyag választék

Használja a hatékony CAD/CAM eljárást a kerámiák, fémsapák és hídvezak kialakításához.

■ Még jövedelmezőbb

Az infiniDent könnyen hozzáférhetővé teszi az Ön számára a cirkónium-oxid anyagot - még akkor is, ha nem rendelkezik égetőkályhával és a fém hídvezak előállításához szükséges CAD/CAM rendszerrel.

CAD/CAM a laboratóriumban



inEos:

CAD/CAM hozzáférés

Az új inEos szkennelési hozzáférést biztosít a CAD/CAM technológiához anélkül, hogy további hardver elemeket kellene vásárolnia. Az inEos karöltve kerámiák és nem-nemesfém pótlások teljes skáláját - beleértve a csontokat is - előállíthatja. A beolvasás gyors és pontos. A szimpla sapkák a forgószkennerrel kerülnek beolvasásra. Hidak esetében a forgószkenner kombinálható a teljes modell bevitelével. A virtuális modell azonnal megjelenik a monitoron a 3D-s felépítéshez. Egyszerűen csak küldje el a fájlt az inEos-hoz (Bensheim, Németország), és 4 munkanapon belül visszakapja a kész pótlást.

inLab:




Nagyobb teljesítmény CAD/CAM felhasználóknak

A kompakt CAD/CAM-asztali egység beépített lézerszkennerral hatékonyságot és rugalmasságot jelent a fogtechnikai labor számára. Ön dönti el, hogy házon belül a laborban állítja elő a sapkákat és vázakat, vagy elküldi az interneten a 3D-s tervet az inEos-hoz, ahol azt formába öntik. Az inLab felhasználók használhatják az inEos szolgáltatásait fém hídvezetők elkészítésére, így módon bővítve a labor termékskáláját. Az inLab elérhető a klasszikus, gazdaságos verzióban, vagy az új MC XL verzióban fokozott kényelemmel és jobb teljesítménnyel. Mindkét egység rendelkezik hálózati hozzáféréssel és megfelel a labor egyedi igényeinek.

inLab szoftver:

Az inLab 3D szoftver lehetővé teszi bármilyen típusú pótlás megtervezését a sapkától a többtagú hídvezetőkig és a testreszabott implant csontokig, függetlenül a használni kívánt anyagtól.

Ez egyszerű egér kattintásokkal kivitelezhető. Ugyanakkor tervezési lehetőségek széles skálája áll rendelkezésre a pótlás elkészítéséhez.

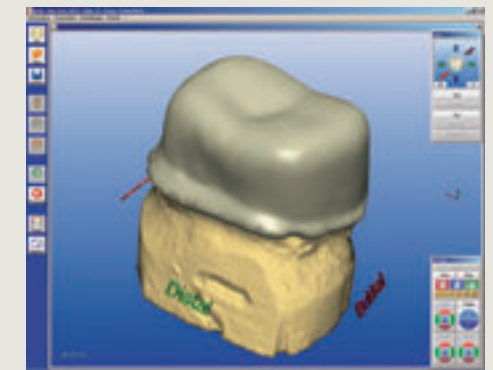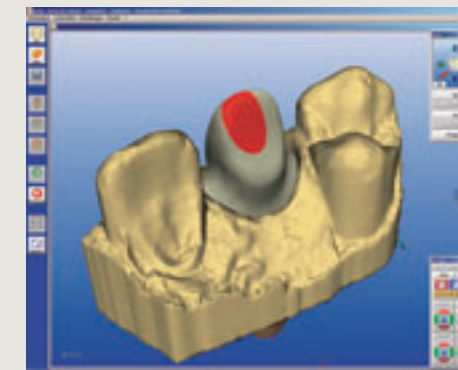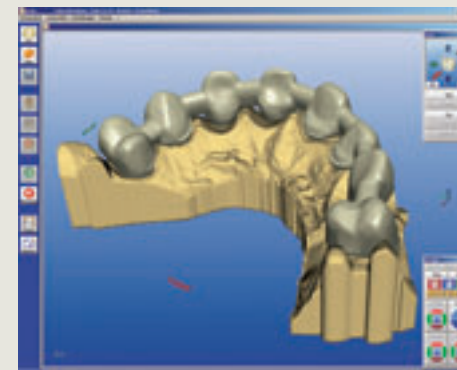



CAD/CAM RENDSZEREK | KÉZIDARABOK | HIGIÉNIAI RENDSZEREK | KEZELŐEGYSÉGEK | RÖNTGEN RENDSZEREK

SIRONA - EGYEDÜLÁLLÓ, VILÁGSZERTE ISMERT RENDSZEREK SZAKÉRTŐJE A FOGÁSZATBAN

A Sirona fogászati felszerelések igen széles skáláját fejleszti és gyártja, beleértve a CAD/CAM rendszereket a fogászati rendelők (CEREC) és fogtechnikai laborok (inLab) részére, Kézidarabokat és Higiéniai rendszereket, Kezelőegységeket és Röntgen rendszereket. A Sirona csúcsmínőségű termékeket állít elő, melyek használata garantáltan egyszerű és messzemenően megtéríti a beléjük fektetett tőkét - előny a praxisnak, segítség a páciensnek. Velünk minden kihívással sikeresen szembenézhet, bízson az általános tapasztalatban, mely szerint: **Nagyszerű nap lesz. A Sironával.**

A Sirona termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:

GlobDent Kft szervíz és telephely - Szélső sor 43 • H-2600 Vác

Tel.: +36 27 502 800 • Fax: +36 27 502 801 • E-mail: globdent@vnet.hu

GlobDent Kft bemutatóterem - Visegrádi u. 82.b • H-1134 Budapest

Tel.: +36 1 801 2105 • Fax: +36 1 801 2797 • E-mail: info.globdent@comunique.hu • www.globdent.hu

Sirona Dental Systems - Fabrikstrasse 31 • D-64625 Bensheim

Tel.: 0180 1889900 • Fax: 0180 5544664 • E-mail: contact@sirona.de • www.sirona.com

The Dental Company

sirona.