

ELSŐ OSZTÁLYÚ LÉZEREK A SIRONATÓL

**Ragadja meg az Xtend lehetőségeit -
és fejlessze tökélyre kezeléseit az Advance-szel**





MODERN LÉZERES FOGÁSZAT, MELY MINDENKINEK MEGKÖNNYÍTI A DOLGÁT

Eljött a lézeres kezelések ideje.

Hatékony csíráatlanítás. Minimális vérzéssel járó sebészi beavatkozások. Támogatás a CEREC pótlások elkészítése közben. Akár a herpesz is kezelhető. A Sirona lézerei bővíthetik a rendelő lehetőségeit, jobb eredményeket biztosítanak és pácienseik is boldogabban távoznak. És mindezt stressz nélkül. Szakértőnek és kevésbé tapasztalt felhasználóknak egyaránt. Akár a fejlesztésre kész SIROLaser Xtend, akár a prémium kategóriás SIROLaser Advance készüléket választja, élvezheti az intuitív menürendszer használatát. Ezek az egységek jelentik a lézeres fogászat jövőjét. **Élvezzen minden napot. A Sironával.**





VÁRAKOZÁSON FELÜLI

Ragadja meg az Xtend lehetőségeit.

A teljes repertoár az alapoktól kezdve. Ehhez jön még az intuitív felhasználói felület, az előre beállított programok és a teljes rugalmasság. A SIROLaser Xtend azonnal használatra kész. Ez a lézer minden bizonnyal hamarosan közkedvelt lesz a rendelőjében! Az egyszerű üzemeltetés csodája. **Sokoldalú segítség a kezdők számára: SIROLaser Xtend.**



MINDIG MUNKÁRA KÉSZ

Fejlessze tökélyre kezeléseit az Advance-szel!

A vezeték nélküli akkumulátoros üzemeltetésnek köszönhetően egész nap zökkenőmentesen hordozhatja egyik helyiségből a másikba. Az akár hat felhasználó számára egyénileg testreszabható beállítások mellett a SIROLaser Advance egy széleskörű készülék csomagot is helyettesít. Élvezze az automatikus kezelési dokumentálást. Kezelje könnyedén a kedvenceit. Döntse el - az opcionálisan rendelhető lábkapcsoló jobban megfelel igényeinek? Egyszerűen a SIROLaser Advance nem hagy maga után kívánnivalót. **A lehető legalkalmasabb a szakemberek számára: SIROLaser Advance.**



As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design



reddot design award
honourable mention 2010



INTELLIGENS, INNOVATÍV TECHNOLOGIA

Érezze otthon magát a lézeres fogászatban.

Technológia, mely mély benyomást tesz. Kezelés, mely inspirál. A SIROLaser mindkét verziója - az Advance és az Xtend - bármikor kész megmutatni, mire képes:

Intuitív kezelés

- Navigáció érintőképernyő segítségével
- Egyértelmű felhasználói utasítások
- Magától értetődő menü ikonok

Azonnali kezelés

- A legfontosabb alkalmazások előre beállított kezelő programok formájában
- Súlygó menü minden előre beállított programhoz a kevésbé gyakorlott felhasználók számára


Egyénileg testreszabható

- 24 programozható alkalmazás
- 12 kedvenc program gyors-előhívó
- Különböző felhasználói profilok, mind saját belépési kóddal
- Adattárolás minden kezelésről és felhasználóról*

Sokoldalú üzemeltetés

- Ergonomikus kézdarab könnyű érintésű ujjkapcsolóval
- Akkumulátoros üzemmód a jobb hordozhatóság érdekében*
- Hajlítható, forgatható és könnyen cserélhető egyszerű használatos hegyek
- Vezeték nélküli lábkapcsoló (opcionális, csak a SIROLaser Advance-hez)

* Fejlesztésként megrendelhető a SIROLaser Xtend-hez.

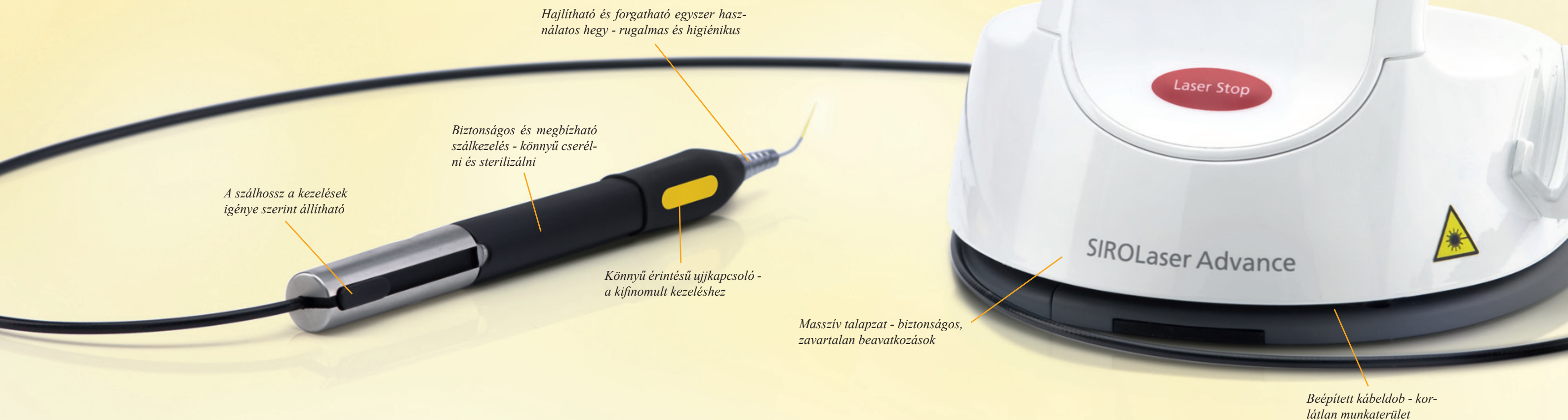

Könnyen hordozható - jól megtervezett fogantyú

Kényelmes érintőképernyő - optimalizált munkafolyamat

Egyszerű navigáció - alkalmazások és előre beállított programok

Hajlítható és forgatható egyszerű használatos hegy - rugalmas és higiénikus

Biztonságos és megbízható szálkezelés - könnyű cserélni és sterilizálni

A szálhossz a kezelések igénye szerint állítható

Könnyű érintésű ujjkapcsoló - a kifinomult kezeléshez

Masszív talapzat - biztonságos, zavartalan beavatkozások

Beépített kábeldob - korlátlan munkaterület



NINCS GYORSABB ÚT A HIBÁTLAN EREDMÉNYHEZ
Élvezze az új kezelési lehetőségek előnyeit.

A SIROLaser Advance és a SIROLaser Xtend a kezelési lehetőségek egyedülálló skáláját nyújtja Önnek. És ez csak a kezdet. Ezek a lézerek boldogabb páciensekkel, hatékony és alacsony fájdalom-szintű kezelésekkel ajándékozzák meg Önt, s egyre másra jó klinikai eredményeket érhet el segítségükkel. A világon számtalan felhasználó ért ezzel egyet: a SIROLaser jelentős lépés a jövő felé.


Sebészeti	Gyökérkezelés	Parodontológia	Egyéb
Tályog Vérzéscsillapítás	Gangréna Pulpotomia	Lézer küret Parodontológiai csírtalanítás	Szájúreg fekély Érzéstelenítés
Ínydaganat Implant feltárás	Bemetszés / Kimetszés Gyökérkezeléshez csírtalanítás	Periimplantitisz stb.	Herpesz stb.
Rostdaganat Sipoly	Operculectomia Íny kivágás		
Frenulectomia Ínykimetszés	stb.		
Ínyplasztika			

Az intuitív navigációnak és a 24 előre beállított fontos kezelő programoknak köszönhetően a legtöbb Sirona lézer azonnal használatba vehető. A terápiás lehetőségek bővítéséhez vegye igénybe a további szabadon programozható alkalmazásokat.




Frenulectomia


- Csaknem vérzésmentes beavatkozás
- Termelődő hő által okozott minimális sérülés
- Vérzéscsillapítás
- Kisebb duzzanatok
- Kíméletes és kényelmes - gyakran csak felületi érzéstelenítést igényel
- Gyorsabb műtét utáni gyógyulás

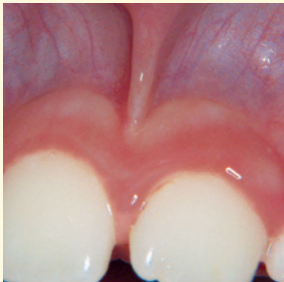

Műtét előtt

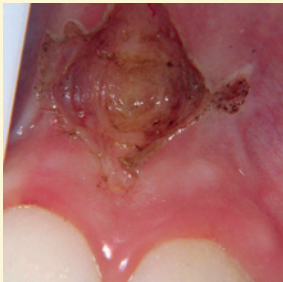

Műtét után

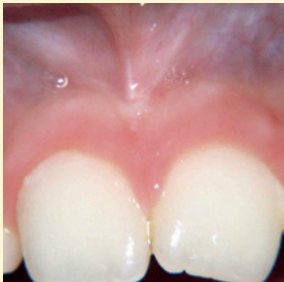

Műtét után 4 héttel

Íny kivágás

- Nincs szükség összevarráásra
- Tiszta, egyenletes lenyomati szélek
- Optimális technika digitális lenyomatvételhez



Műtét előtt



Műtét után



Műtét után 2 héttel

Ínyplasztika

- A megfelelő körvonalak könnyű megállapítása a kezelés alatt - az eredmény megegyezik az Ön által kialakított látvánnyal
- Minimális vérzés és műtét utáni kényelmetlenség



Műtét előtt



Műtét után



Műtét után 2 héttel



OK SZOLGÁLTATÁS, MELY MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT

Teljes körű szolgáltatásokkal támogatott csúcsminőségű lézer.

Ha a SIROLaser Advance-t vagy a SIROLaser Xtend-et választja, a legjobb teljesítményt nyújtó, csúcsminőségű készüléket választja. Az alkalmazások széles skálája, az ésszerű fogyasztás és a Sirona szakértelem mellett az exkluzív felhasználói képzések, valamint a praktikus betegtájékoztatók előnyeit is élvezheti. Tájékozódjon a Sirona által a rendelője számára felkínált lehetőségekről. Látogasson el a www.sirona.com oldalra.

Technikai adatok	SIROLaser Advance	SIROLaser Xtend
Hullámhossz	970 +/- 15 nm	970 +/- 15 nm
Üzem módok	Folyamatos, Szakaszos, Csúcs-impulzusos	Folyamatos, Szakaszos, Csúcs-impulzusos
Teljesítmény	7 W	5 W*
Csúcsimpulzus	~ 14 W	~ 10 W*
Frekvencia	1 - 10.000 Hz	1 - 1.000 Hz*
Ciklus	Módosítható	50% (rögzített)*
Súly	~ 1,3 kb (kézidarabbal és akkumulátorral)	~ 1,0 kg (kézidarabbal)
Méret	~ 19,7 x 18,2 x 18,9 cm	~ 19,7 x 18,2 x 18,9 cm

Tartozékok	SIROLaser Advance	SIROLaser Xtend
Szoftver		
Felhasználói profilok	6 x (módosíthatók)	2 x (rögzített)*
Naplózás	akár 50 x (felhasználónként)	- *
Kedvencek	12 x	- *
Hardver		
Plusz kézidarab burkolat a felváltott kezeléshez	1 x	- *
Optikai szál	320 µm-es szál (5 db) és 200 µm-es szál (5 db)	320 µm-es szál (4 db) és 200 µm-es szál (1 db)
Egyszer használatos hegyek hajlító eszközzel	100 x	50 x
Tölthető akkumulátor	1 x (már beépítve)	- *
Opciók		
Vezeték nélküli lábkapcsoló	+	Nem rendelhető
Fejlesztő csomag	Nem rendelhető	+

* Fejlesztés lehetséges

Tartozékok	Ref. No.
Kézidarab burkolat a felváltott kezeléshez	62 56 767
320 µm-es szál készlet (5 db)	62 56 759
200 µm-es szál készlet (5 db)	62 56 742
Szálvágó	60 91 669
Egyszer használatos hegy csomag (100 db) hajlító eszközzel	62 56 692
Lézer védő szemüveg (átlátszó szűrővel)	61 81 585
Lézer védő szemüveg szemüvegeseknek (átlátszó szűrővel)	61 81 593
Lézer védő szemüveg pácienseknek (átlátszó szűrővel)	60 47 745
Tölthető akkumulátor	62 56 833

Opció: Vezeték nélküli lábkapcsoló (csak SIROLaser Advance-hez)	62 56 841
---	-----------

Alap Xtend fejlesztés	63 16 934
Teljes Xtend fejlesztés	63 16 942

SIROLaser Advance rendelési számok az alábbi országokban:
Németország, Ausztria: 62 56 783; Svájc: 62 58 441; Olaszország: 62 58 508;
Hollandia, Belgium: 62 58 425; Franciaország: 62 58 490; Anglia: 62 58 490;
Spanyolország: 62 58 466; Portugália: 62 58 516; Dánia: 62 58 458;
Finnország, Norvégia, Svédország: 62 58 474. További országokba kérésre.

SIROLaser Xtend rendelési számok az alábbi országokban:
Németország, Ausztria: 63 13 733; Svájc: 63 13 774; Olaszország: 63 13 824;
Hollandia, Belgium: 63 13 865; Franciaország: 63 13 741; Anglia: 63 13 832;
Spanyolország: 63 13 758; Portugália: 63 13 840; Dánia: 63 13 857;
Finnország, Norvégia, Svédország: 63 13 873. További országokba kérésre.





CAD/CAM RENDSZEREK | KÉZIDARABOK | HIGIÉNIAI RENDSZEREK | KEZELŐEGYSÉGEK | RÖNTGEN RENDSZEREK

SIRONA - EGYEDÜLÁLLÓ, VILÁGSZERTE ISMERT RENDSZEREK SZAKÉRTŐJE A FOGÁSZATBAN

A Sirona fogászati felszerelések igen széles skáláját fejleszti és gyártja, beleértve a CAD/CAM rendszereket a fogászati rendelők (CEREC) és fogtechnikai laborok (inLab) részére, Kézidarabokat és Higiéniai rendszereket, Kezelőegységeket és Röntgen rendszereket. A Sirona csúcsmínőségű termékeket állít elő, melyek használata garantáltan egyszerű és messzemenően megtérítik a beléjük fektetett tőkét - előny a praxisnak, segítség a páciensnek. Bízzon bennünk, velünk minden kihívással sikeresen szembenézhet. **Élvezzen minden napot. A Sironával.**

A Sirona termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:

GlobDent Kft szervíz és telephely - Szélső sor 43 • H-2600 Vác

Tel.: +36 27 502 800 • Fax: +36 27 502 801 • E-mail: globdent@vnet.hu

GlobDent Kft bemutatóterem - Visegrádi u. 82.b • H-1132 Budapest

Tel.: +36 1 801 2105 • Fax: +36 1 801 2797 • E-mail: info.globdent@comunique.hu • www.globdent.hu

Sirona Dental Systems - Fabrikstrasse 31 • D-64625 Bensheim

Tel.: 0180 1889900 • Fax: 0180 5544664 • E-mail: contact@sirona.de • www.sirona.com

The Dental Company

sirona.